


# テストステロン-5 $\alpha$ -リダクターゼ阻害試験(例)

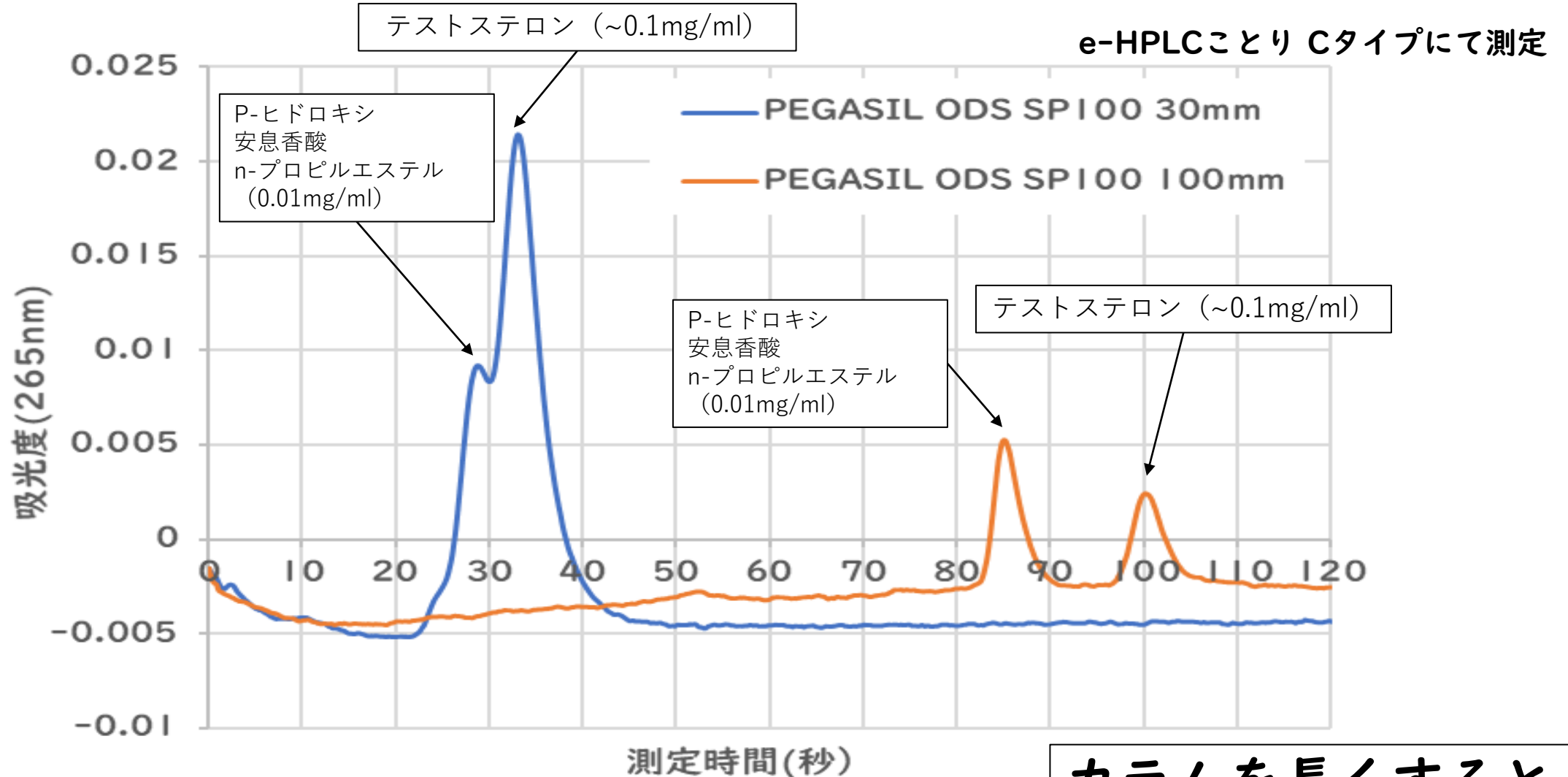

## 測定条件

溶離液：100%メタノール

カラム：PEGASIL ODS SP100 30mm (センシュエ科学社製)

カラム：PEGASIL ODS SP100 100mm (センシュエ科学社製)

流量：1.5mL/min

分析時間：120秒

サンプル注入量：2.7 $\mu$ L

検出器：265nm

カラムを長くすると  
ピーク分離が可能

化粧品開発企業研究開発部様ご提供